

전자 자가보고 시스템 사용설명서 ver2.2


목차

1. iCReaT 모바일 앱 사용법
 - 1.1 로그인 방법
 - 1.2 일정 확인
 - 1.3 문진 제출
 - 1.4 체온 및 혈압 측정
 - 1.5 알림 및 내정보 확인
2. 체온계, 혈압계기기 사용법
 - 2.1 체온계 연결
 - 2.2 체온 측정
 - 2.3 혈압 측정
 - 2.4 혈압계 연결

1. iCReaT 모바일 앱 사용법

1.1 로그인 방법

과제번호와 대상자번호를 입력하여 로그인 할 수 있습니다.

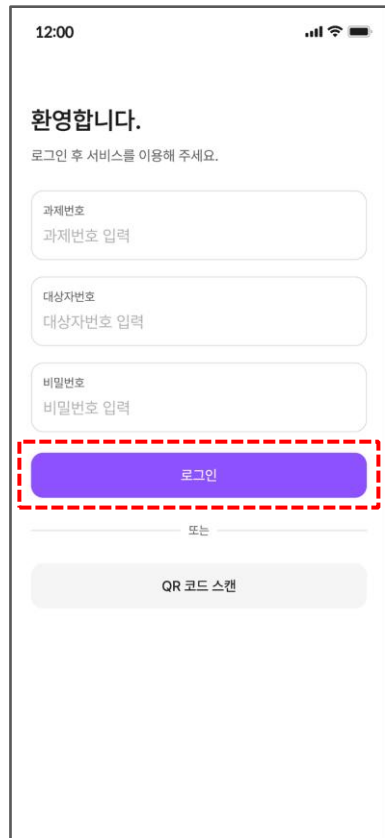

12:00

환영합니다.
로그인 후 서비스를 이용해 주세요.

과제번호
과제번호 입력

대상자번호
대상자번호 입력


비밀번호
비밀번호 입력

로그인

또는

QR 코드 스캔

QR 코드를 스캔 버튼을 눌러 QR 스캔 화면으로 이동할 수 있습니다.

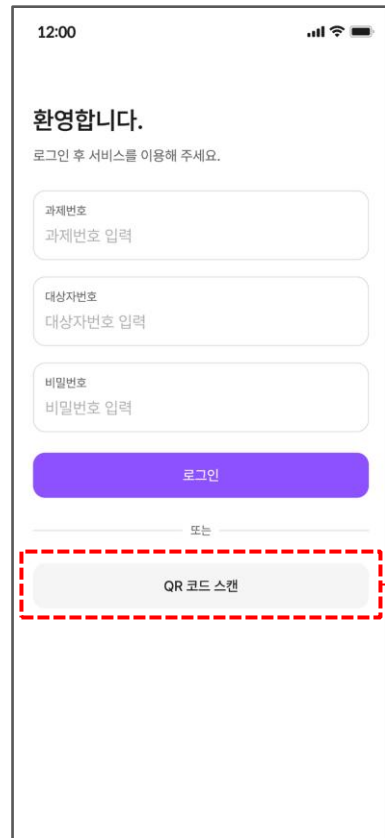

12:00

환영합니다.
로그인 후 서비스를 이용해 주세요.

과제번호
과제번호 입력

대상자번호
대상자번호 입력


비밀번호
비밀번호 입력

로그인

또는

QR 코드 스캔

QR을 스캔하면 자동으로 로그인 화면으로 이동한 뒤 과제번호와 대상자번호가 채워집니다.

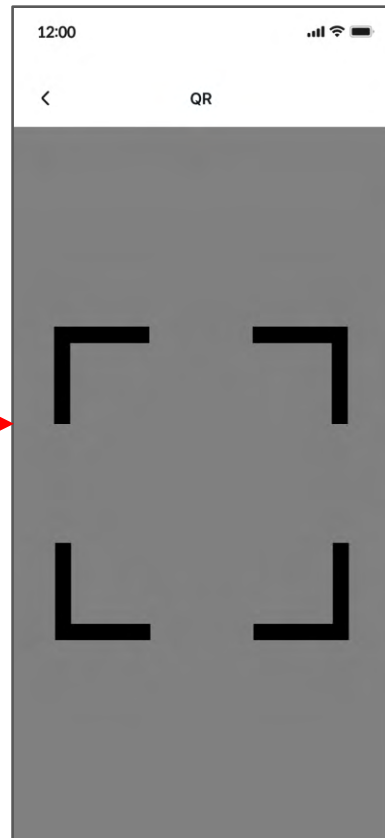

12:00

< QR


QR code scanning area with four corner markers.

1.2 일정 확인

일정 탭에서 주간 달력을 선택하면 날짜를 바꿀 수 있습니다.



달력 버튼을 누르면 월간 달력을 표시합니다.

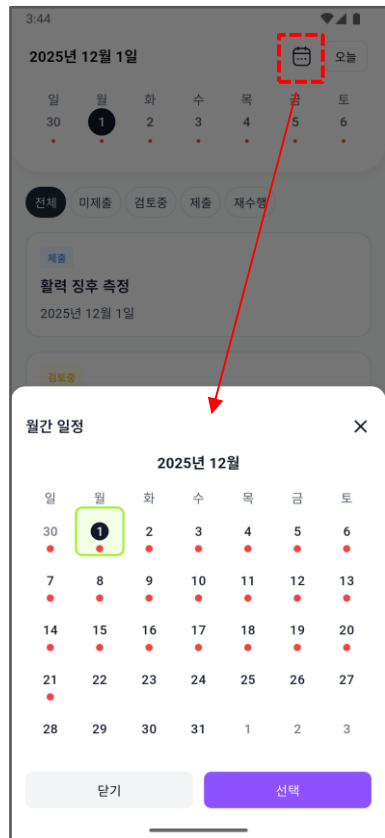

오늘 버튼을 누르면 오늘날짜로 이동합니다.




목록에서 문건의 제출 상태에 따라 필터링 할 수 있습니다.




목록에서 문진을 누르면 문진 작성 화면 또는 이미 제출된 문진의 경우 제출된 문진 화면으로 이동합니다.



예시로 [제출] 상태의 활력 징후 측정 문진을 누르면 아래 제출된 문진 화면으로 이동합니다.

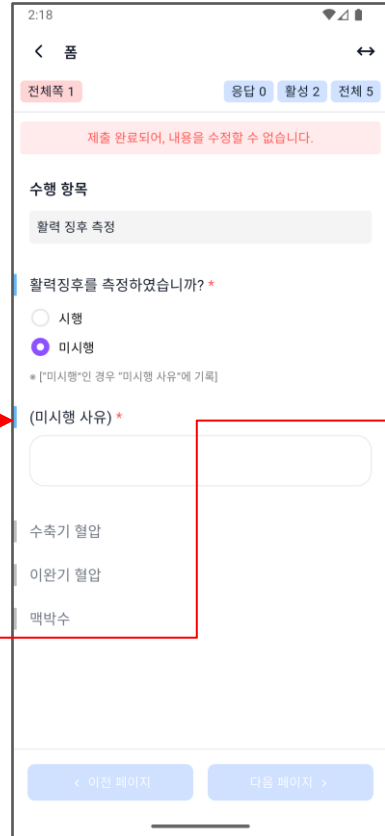

예시로 [미제출] 상태의 이상사례 문진을 누르면 아래 문진 작성 화면으로 이동합니다.

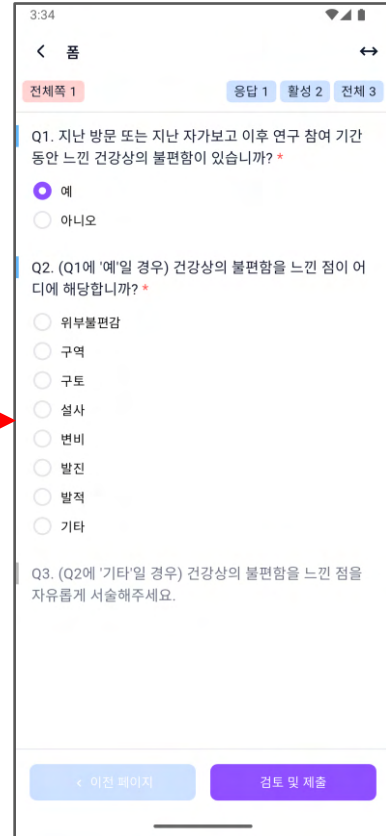

1.3 문진 제출

예, 아니오를 눌러 답을 선택할 수 있습니다.

3:34

< 품 >

전체쪽 1 응답 1 활성 2 전체 3

Q1. 지난 방문 또는 지난 자가보고 이후 연구 참여 기간 동안 느낀 건강상의 불편함이 있습니까? *

☒ 예

☐ 아니오

Q2. (Q1에 '예'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점이 어디에 해당합니까? *

☐ 위부분편감

☐ 구역

☐ 구토

☐ 설사

☐ 변비

☐ 발진

☐ 발적

☐ 기타

Q3. (Q2에 '기타'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점을 자유롭게 서술해주세요.

< 이전 페이지 검토 및 제출

주어진 선택지를 눌러 답을 선택할 수 있습니다.

3:34

< 품 >

전체쪽 1 응답 1 활성 2 전체 3

Q1. 지난 방문 또는 지난 자가보고 이후 연구 참여 기간 동안 느낀 건강상의 불편함이 있습니까? *

☒ 예

☐ 아니오

Q2. (Q1에 '예'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점이 어디에 해당합니까? *

☐ 위부분편감

☐ 구역

☐ 구토

☐ 설사

☐ 변비

☐ 발진

☐ 발적

☐ 기타

Q3. (Q2에 '기타'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점을 자유롭게 서술해주세요.

< 이전 페이지 검토 및 제출

주관식 문항은 답을 직접 작성할 수 있습니다.

3:38

< 품 >

전체쪽 1 응답 2 활성 3 전체 3

Q1. 지난 방문 또는 지난 자가보고 이후 연구 참여 기간 동안 느낀 건강상의 불편함이 있습니까? *

☒ 예

☐ 아니오

Q2. (Q1에 '예'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점이 어디에 해당합니까? *

☐ 위부분편감

☐ 구역

☐ 구토

☐ 설사

☐ 변비

☐ 발진

☐ 발적

☒ 기타

Q3. (Q2에 '기타'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점을 자유롭게 서술해주세요. *

내용을 입력해주세요.

0/5000

< 이전 페이지 검토 및 제출

*표는 필수 입력 사항을 표시합니다

3:38

< 품 >

전체쪽 1 응답 2 활성 3 전체 3

Q1. 지난 방문 또는 지난 자가보고 이후 연구 참여 기간 동안 느낀 건강상의 불편함이 있습니까? *

☒ 예

☐ 아니오

Q2. (Q1에 '예'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점이 어디에 해당합니까? *

☐ 위부분편감

☐ 구역

☐ 구토

☐ 설사

☐ 변비

☐ 발진

☐ 발적

☒ 기타

Q3. (Q2에 '기타'일 경우) 건강상의 불편함을 느낀 점을 자유롭게 서술해주세요. *

내용을 입력해주세요.

0/5000

< 이전 페이지 검토 및 제출

"대상자 만족도 조사" 문진은 다음과 같이 여러 구성되어, 원하는 선택지를 눌러 답을 입력할 수 있습니다.

3:55

< 품 >

현재 1 전체쪽 2 응답 0 활성 2 전체 20

대상자 만족도 조사

본 임상연구에 대하여 귀하의 만족도를 조사하고자 합니다.
귀하의 개인 경험을 바탕으로 각 질문에 답해 주십시오. 해당 되는 곳을 선택해주시요.

귀하는 본 임상연구를 참여하기 전에 타 임상연구를 참여해본 경험이 있으십니까? *

☐ 네(▶ 1 번 항목부터)

☐ 아니요(▶ 2 번 항목부터)

< 이전 페이지 다음 페이지 >

다음 페이지를 누르면 항목이 표시됩니다. 각 항목의 질문에 따라 '매우 불만족'에서부터 '매우 만족'까지 하나를 선택해야 합니다.

3:56

< 품 >

현재 2 전체쪽 2 응답 1 활성 19 전체 20

1. 이전에 참여한 임상연구에 비해 본 임상연구(비대면으로 진행)에 전반적으로 만족하십니까?

2. 대면 전자 동의 과정에 대해 전반적으로 만족하십니까? *

☐ 매우 불만족

☐ 불만족

☐ 보통

☐ 만족

☐ 매우만족

3-1 모바일 앱을 사용하는 것이 직관적이고 쉬웠나요? *

☐ 매우 불만족

☐ 불만족

☐ 보통

☐ 만족

☐ 매우만족

3-2 모바일 앱의 디자인이 시각적으로 깔끔하고 일관되었나요? *

☐ 매우 불만족

☐ 불만족

☐ 보통

< 이전 페이지 검토 및 제출

문항을 모두 작성하면 제출 버튼을 눌러 연구진에게 전달할 수 있습니다.

3:56

< 품 >

현재 2 전체쪽 2 응답 1 활성 19 전체 20

1. 이전에 참여한 임상연구에 비해 본 임상연구(비대면으로 진행)에 전반적으로 만족하십니까?

2. 대면 전자 동의 과정에 대해 전반적으로 만족하십니까? *

☐ 매우 불만족

☐ 불만족

☐ 보통

☐ 만족

☐ 매우만족

3-1 모바일 앱을 사용하는 것이 직관적이고 쉬웠나요? *

☐ 매우 불만족

☐ 불만족

☐ 보통

☐ 만족

☐ 매우만족

3-2 모바일 앱의 디자인이 시각적으로 깔끔하고 일관되었나요? *

☐ 매우 불만족

☐ 불만족

☐ 보통

< 이전 페이지 검토 및 제출

검토 및 제출 버튼을 누르면 수행 내역을 검토할 수 있도록 검토 페이지가 출력됩니다.

4:02

수행 내역 검토
아래 수행 내역을 검토해주세요.

대상자 만족도 조사

귀하는 본 임상연구를 참여하기 전에 타 임상연구를 참여해본 경험이 있으십니까? *

아니요(▶ 2 번 항목부터)

2. 대면 전자 동의 과정에 대해 전반적으로 만족하십니까? *

보통

3-1 모바일 앱을 사용하는 것이 직관적이고 쉬웠나요? *

보통

3-2 모바일 앱의 디자인이 시각적으로 깔끔하고 일관되었나요? *

보통

3-3 모바일 앱이 사용자 입력에 빠르고 정확하게 반응하였나요? *

보통

3-4 데이터를 간편하고 오류 없이 입력할 수 있었나요? *

보통

3-5 필요한 알림을 적절히 제공받았나요? *

보통

3-6 앱이 다른 앱의 기능을 방해하지는 않았나요? *

(작성 내용 없음)

3-7 앱 사용중 오류가 자주 발생하지 않았나요? *

(작성 내용 없음)

3-8 앱의 로딩 시간이 오래 걸리지 않았나요? *

(작성 내용 없음)

취소 제출

제출 버튼을 눌렀을 때, 항목에 이상이 있다면,
가장 첫 번째 이상 항목 (예시에서는 필수
항목이지만 작성 내용이 없음)이 표시됩니다.

상하단의 그림자는 항목이 위, 아래로 더
있음을 의미합니다.

제출한 문진인 경우 읽기만 가능합니다.

1.4 체온 및 혈압 측정

혈압(수축기, 이완기, 맥박) 문진을 누르면 측정 방식 선택 화면으로 이동합니다.

측정 방식을 직접 입력과 블루투스 중 하나를 선택합니다.

혈압 값을 직접 입력합니다.

입력한 값이 문항에 입력됩니다.

4:48

< 품 >

전체쪽 1 응답 1 활성 4 전체 5

수행 항목

활력 징후 측정

활력징후를 측정하였습니까? *

☒ 시행
☐ 미시행

* ["미시행"인 경우 "미시행 사유"에 기록]

수축기 혈압 *

수축기 혈압을 입력해주세요.

이완기 혈압 *

이완기 혈압을 입력해주세요.

맥박수 *

맥박을 입력해주세요.

(미시행 사유)

< 이전 페이지 검토 및 제출

4:51

< 혈압 >

측정 방법을 선택해 주세요.

직접 입력 블루투스

4:49

< 혈압 직접 입력 >

혈압을 직접 입력하세요.

수축기 140 mmHg

이완기 90 mmHg

맥박 100 bpm

저장

4:49

< 품 >

전체쪽 1 응답 4 활성 4 전체 5

수행 항목

활력 징후 측정

활력징후를 측정하였습니까? *

☒ 시행
☐ 미시행

* ["미시행"인 경우 "미시행 사유"에 기록]

수축기 혈압 *

140 mmHg

이완기 혈압 *

90 mmHg


맥박수 *

100 BPM

(미시행 사유)

< 이전 페이지 검토 및 제출

측정 방식을 직접 입력과 블루투스 중 하나를 선택합니다.

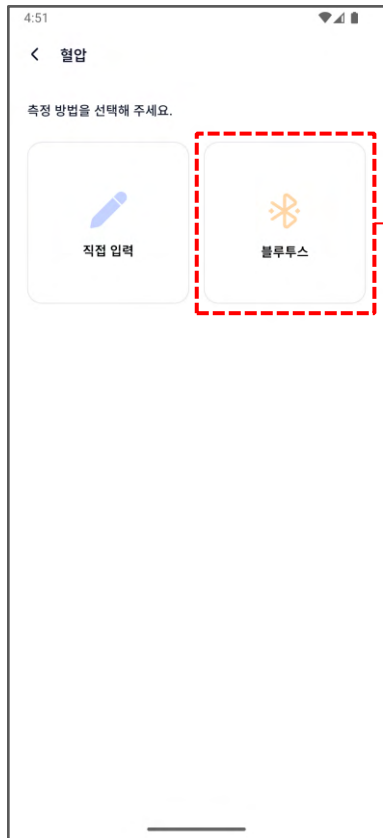


블루투스를 선택한 경우, 가이드를 따라 혈압 측정 후 연결 시작을 눌러 블루투스 연결을 시작합니다.




연결 중에 블루투스 기기 데이터가 수신되면 자동으로 결과 화면으로 이동합니다.



혈압 측정 결과를 앱에서 확인할 수 있습니다. 저장 버튼을 누르면 문진 화면으로 돌아가며 문진 항목에 값을 채워넣습니다.

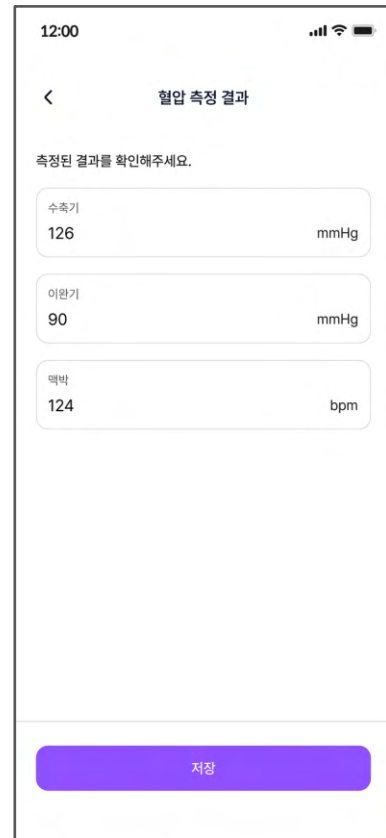


체온 문진을 누르면 측정방식 선택화면으로 이동합니다.

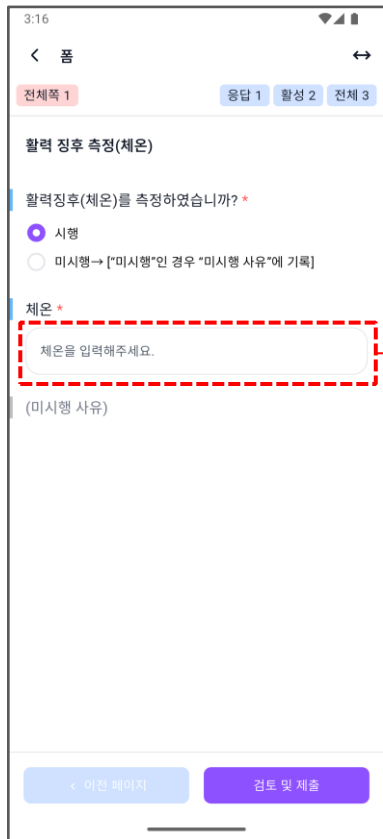


측정 방식을 직접 입력과 블루투스 중 하나를 선택합니다.




체온 값을 직접 입력합니다.

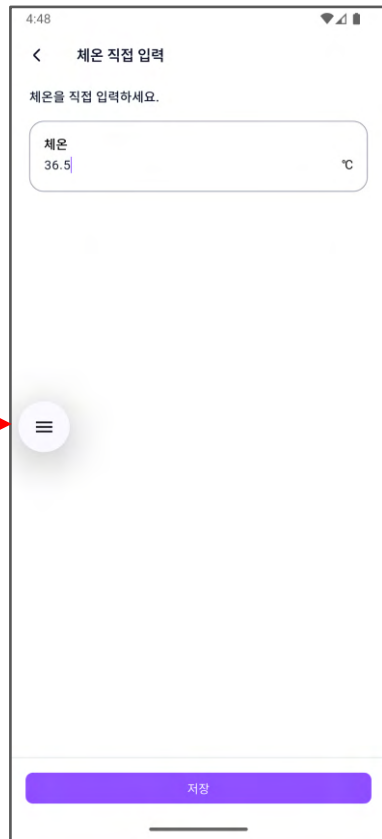

입력한 값이 문항에 입력됩니다.

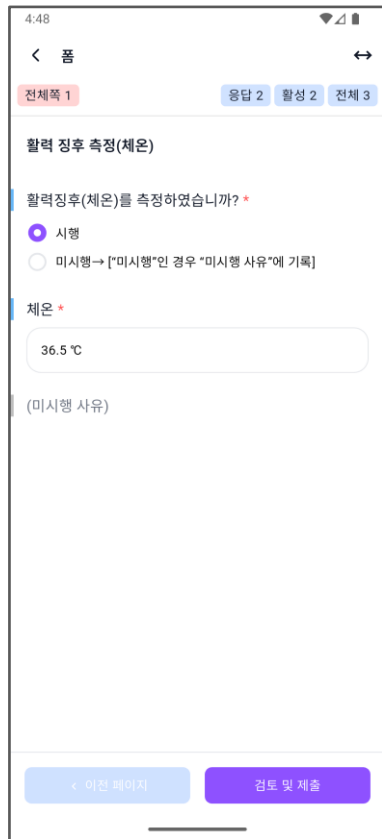

측정 방식을 직접 입력과 블루투스 중 하나를 선택합니다.

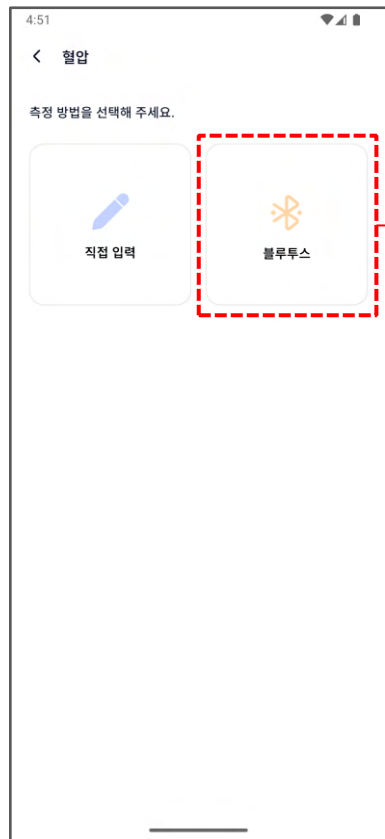

화면에 들어오면 바로 주변 체온계를 탐색하여 자동으로 연결합니다. 가이드를 따라 준비해주세요.




연결이 완료되면 앱에서 실시간으로 체온을 수신받을 수 있습니다. 저장을 누르면 측정값을 문진에 항목에 채웁니다.



1.5 알림 및 내정보 확인

알림 화면에서는 지금까지 연구대상자가 연구진으로부터 받은 알림을 표시합니다.

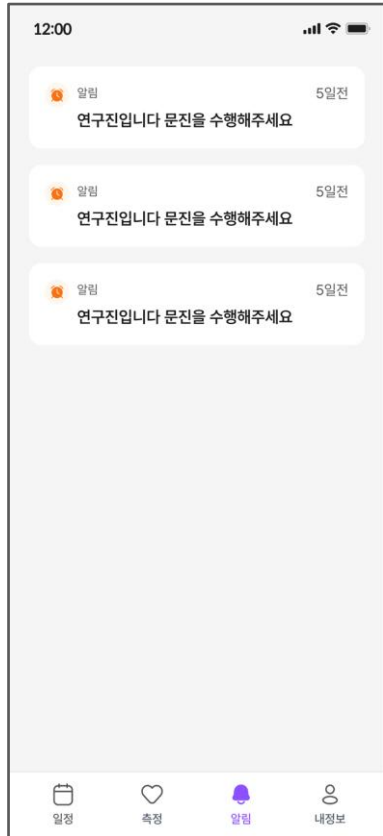


내 정보 화면에서는 임상 연구의 정보와
동의서 열람, 앱 사용 방법, 알림 설정을 안내
합니다.




동의를 열람의 보기 버튼을 눌러
전자동의서를 바로 열람하거나 다운로드를
눌러 모바일 기기에 다운로드 할 수 있습니다.




도구의 '알림 설정' 버튼을 눌러 로컬 알림을
설정할 수 있습니다.

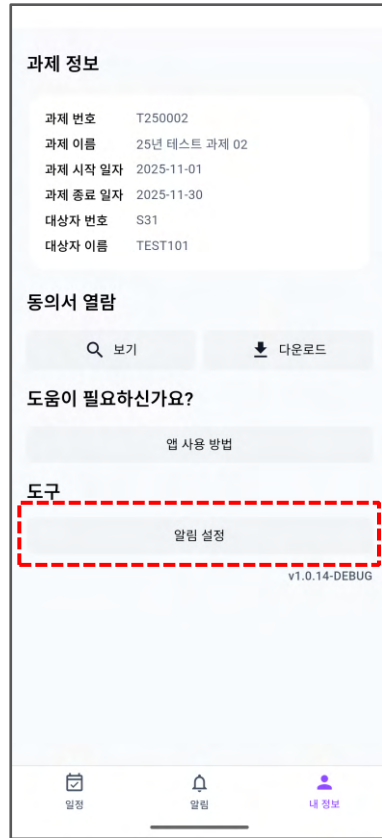


알림 목록에서 생성한 알림을 확인할 수 있으며 + 버튼을 눌러 알림을 추가할 수 있습니다.
(최대 알림 개수 12개)

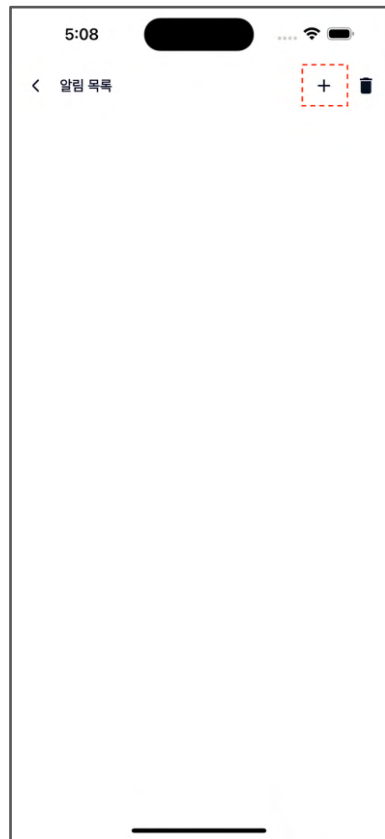

알림 시간, 제목, 설명, 반복 설정을 설정한 뒤 '알림 추가' 버튼을 눌러 알림을 설정할 수 있습니다.

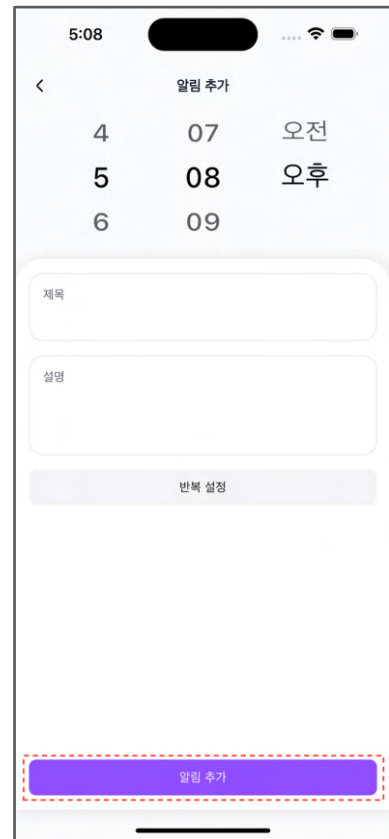

일정한 요일마다 반복적으로 설정할 수 있습니다.

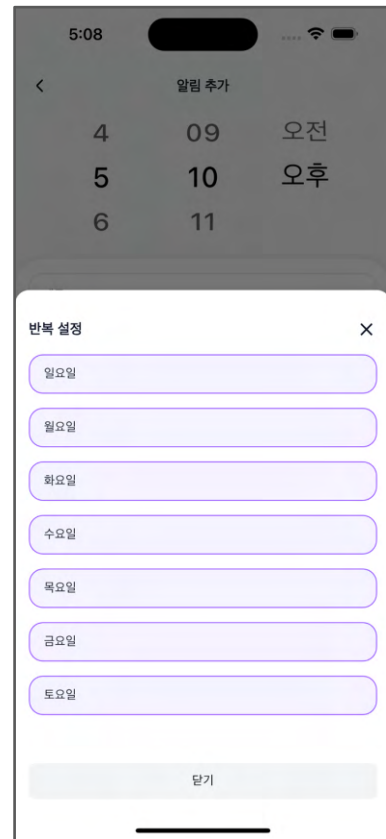

'휴지통' 버튼을 누르면 생성한 알림 규칙을 삭제할 수 있습니다.



2. 체온계, 혈압계기기 사용법

2.1 체온계 연결

전원ON

① 버튼을 눌러주세요



블루투스 연결

④ 버튼을 2초간 길게 눌러주세요



2.2 체온 측정

체온모드 변경

 버튼을 눌러 체온모드로 맞춰주세요



체온 측정



사물 온도측정



소리 ON

체온측정 시작

① 버튼을 눌러주세요



낮음
(36.0°C 미만)

정상
(36.0°C ~ 37.5°C)

미열
(37.6°C ~ 38.5°C)

고열
(38.5°C 초과)

2.3 혈압 측정

Step1

기기 시작



커프를 착용하고 파란색 버튼을 눌러
혈압 측정을 시작합니다

Step2

기기 종료



결과 화면이 나오면
파란색 버튼을 눌러 기기를 종료합니다.

Step3

페어링 모드 진입



화면에 알파벳 P가 표시될때까지
블루투스 버튼을 눌러 앱과 연결을 해주세요.

10초이상 누르고 있으면 블루투스가 꺼집니다.

2.4 혈압계 연결

Step1

블루투스 연결 요청

블루투스 연결 요청

BLESmart_0000059AED281DB6CCBA 기기를 등록할
까요?

취소

등록

최초실행 시 연결 요청을 등록해주세요.

Step2


혈압 기록 표시



가장 최근 기록한 혈압 데이터 부터 표시됩니다.

Step3

측정 결과 확인

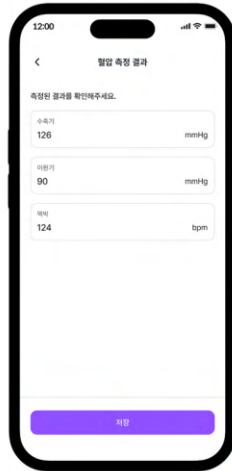

앱과 통신이 완료되면 화면이 점멸하며
앱에서 결과 화면이 나옵니다.